



**MULTI SCIENCES**

联科生物

**Mouse Th17 Staining Kit**

小鼠 Th17 染色试剂盒

This package insert must be read entirely before using this product. For proper performance, use the insert provided with each individual product received.

**Catalog Number**

KTH217 - 25

KTH217 - 100

Optimization for mouse Th17 staining in anticoagulated blood and splenocytes.

已优化的小鼠抗凝血和脾细胞的Th17染色。

**For research use only. Not for use in diagnostic procedures.**

仅用于科研，不得用于临床诊断。

## INTRODUCTION

The kit is designed to detect frequencies of Th17 cells in T lymphocytes (or CD4<sup>+</sup> helper T cells) in mouse anticoagulated blood or splenocytes. Th1, Th2 and Th17 cells are subsets differentiated from helper T cells (strictly speaking, that is Th0 cells) under physiological and pathological conditions. There are extremely few Th1, Th2 or Th17 cells in peripheral blood in a resting state (unstimulated state, e.g. normal physiological state in mouse) due to the weak differentiation ability of Th0 cells, thus, it's hardly to detect IFN- $\gamma$ , IL-4 and IL-17A. Th0 cells could differentiate to Th1, Th2 or Th17 cells dependent on different cytokines when stimulated by external factors (e.g. stimuli, pathogens), and more IFN- $\gamma$ , IL-4 and IL-17A could be detected. In experiment, it is to measure the ability of Th cells in response to stimuli.

Generally, Phorbol 12-Myristate 13-Acetate (PMA) and Ionomycin are used as stimuli. PMA, a PKC activator, could activate phosphorylation of many protein kinases in downstream, cascade reaction induces protein expression, then results in activation of T cells. PKC could be activated in the combination of DAG and Ca<sup>2+</sup> in cells, with the involvement of Ionomycin (a calcium transporter, transport Ca<sup>2+</sup> from organelles to cytoplasm), PKC could be further activated in T cells. So PMA and Ionomycin could activate T cells synergistically.

Activated T cells would secrete cytokines to extracellular environment, which could not be detected by flowcytometry, thus cytokines should be blocked in the cell. Cytokines are synthesized in the Golgi and some may traffic through the endoplasmic reticulum to be released in soluble form in the extracellular environment. Blocking secretion by disrupting Golgi to cut off the way of cytokine transport. Generally, Brefeldin A and/or Monensin are used as blocker.


Sometimes, more cytokines could be detected in sample after separation by lymphocyte separation medium in our experiment. The best protocol should be optimized by the end-user.

## LIMITATIONS OF THE PRODUCT

The product is intended for flowcytometry applications. FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC PROCEDURES.

The product should not be used beyond the expiration date on the label.

Do not mix reagents with those from other lots or sources.

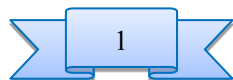

## 产品介绍

本产品用于检测小鼠抗凝血或脾细胞中，Th17 细胞在 T 淋巴细胞 (或 CD4<sup>+</sup>辅助 T 细胞)中的比例。通常所说的 Th1、Th2 和 Th17 是指在各种生理与病理条件下有能力分化为 Th1、Th2 和 Th17 的 T 辅助细胞 (严格意义上是 Th0 细胞)。静息状态 (即未受任何刺激, 如小鼠的正常生理状态)下, Th0 分化为 Th1、Th2 和 Th17 的能力非常弱, 所以外周血中仅含有极少量的 Th1、Th2 和 Th17 细胞, 这时所能检测到的 IFN- $\gamma$ 、IL-4 和 IL-17A 也微乎其微。而当 Th 细胞受到外界因素 (如刺激素、病原体等)刺激, 其中 Th0 即会向 Th1、Th2 或 Th17 分化, 具体分化趋向取决于细胞因子的种类。此时, 检测到的 IFN- $\gamma$ 、IL-4 或 IL-17A 也较多。实验中检测的 Th1、Th2 和 Th17 实际上是检测 Th 细胞对刺激素刺激的反应能力。


通常选用的刺激素为 Phorbol 12-Myristate 13-Acetate (PMA, 佛波酯)和 Ionomycin (离子霉素)。其中 PMA 为 PKC (蛋白激酶 C)的激活物, PKC 则可激活下游众多的蛋白激酶的磷酸化, 形成级联反应, 导致许多蛋白的表达, 进而引起 T 细胞的活化。在细胞内, PKC 可被 DAG (二脂酰甘油)和 Ca<sup>2+</sup>的共同作用而激活, 因此在 Ionomycin (Ca<sup>2+</sup>的转运剂, 可将细胞器内的 Ca<sup>2+</sup>转运至胞浆内)的参与下, T 细胞内 PKC 可被进一步激活。可见, PMA 与 Ionomycin 协同活化 T 细胞。

活化的 T 细胞可分泌多种细胞因子至细胞外, 而流式细胞仪仅能检测细胞内的抗原, 所以应将细胞因子阻断在胞内。细胞因子在高尔基体中合成, 某些蛋白通过内质网运输以可溶性形式分泌至细胞外。破坏高尔基体即可切断细胞因子的转运途径, 阻断其分泌。通常选用的阻断剂为 Brefeldin A (BFA, 布雷非德菌素 A)和/或 Monensin (莫能霉素)。

在我们的试验中, 有时样本经淋巴细胞分离液分离后, 检测的细胞因子比例更高。用户可自行摸索样本经淋巴细胞分离液分离后的检测效果, 以确定最佳检测方案。

## 产品的局限

1. 本产品用于流式细胞实验, 仅用于科学研究, 非诊断试剂, 不能用于临床诊断。
2. 请在本产品标记的有效期内使用。
3. 本产品的试剂不能与其他批号的试剂或其他来源的试剂混合使用。

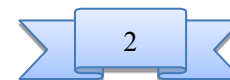


### MATERIALS PROVIDED AND STORAGE

Components	Product Code	-25	-100
Anti-Mouse CD3 $\epsilon$ , FITC (Clone: 145-2C11)	AM003E01	150 $\mu$ l	600 $\mu$ l
Anti-Mouse CD4, PerCP-Cy5.5 (Clone: GK1.5)	AM00407	150 $\mu$ l	600 $\mu$ l
Anti-Mouse IL-17A, PE (Clone: 17B7)	AM011704	150 $\mu$ l	600 $\mu$ l
PMA/Ionomycin Mixture (250 $\times$ )	CS1001	30 $\mu$ l	120 $\mu$ l
BFA/Monensin Mixture (250 $\times$ )	CS1002	30 $\mu$ l	120 $\mu$ l
FIX & PERM Medium A	GASA	3 ml	12 ml
FIX & PERM Medium B	GASB	3 ml	12 ml
Flow Cytometry Staining Buffer (1 $\times$ )	S1001	125 ml	125 ml $\times$ 3

**Note:** PMA/Ionomycin Mixture (250 $\times$ ) and BFA/Monensin Mixture (250 $\times$ ) can be stored at - 20 $^{\circ}$ C, FIX & PERM Medium A and Medium B can be stored at room temperature, other reagents can be stored at 2 - 8 $^{\circ}$ C. All reagents can be stable for at least 1 year when stored at recommended condition.

### OTHER SUPPLIES REQUIRED

1. **Cell culture medium** (e.g. RPMI 1640, DMEM).
2. **Fetal Bovine Serum** (Maybe needed)
3. **Lymphocyte separation medium** (Cat No: MLSM1092, MultiSciences) (Maybe needed)
4. **Compensation Beads** (Maybe needed)
5. **Paraformaldehyde, 4%** (Cat No: F0001, MultiSciences) (Maybe needed)
6. **12  $\times$  75 mm round bottom test tubes.**
7. **Vortexer.**
8. **CO<sub>2</sub> incubator.**
9. **Swing-out horizon centrifuge** (with rotor for 15 ml tubes).

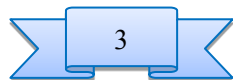

### 提供的材料和贮存

组分	编号	-25	-100
抗小鼠 CD3 $\epsilon$ , FITC (克隆号: 145-2C11)	AM003E01	150 $\mu$ l	600 $\mu$ l
抗小鼠 CD4, PerCP- Cy5.5 (克隆号: GK1.5)	AM00407	150 $\mu$ l	600 $\mu$ l
抗小鼠 IL-17A, PE (克隆号: 17B7)	AM011704	150 $\mu$ l	600 $\mu$ l
佛波酯/离子霉素混合物 (250 $\times$ )	CS1001	30 $\mu$ l	120 $\mu$ l
布雷非德菌素 A/莫能霉素混合物 (250 $\times$ )	CS1002	30 $\mu$ l	120 $\mu$ l
固定破膜剂试剂 A	GASA	3 ml	12 ml
固定破膜剂试剂 B	GASB	3 ml	12 ml
流式染色缓冲液 (1 $\times$ )	S1001	125 ml	125 ml $\times$ 3

**注:** 佛波酯/离子霉素混合物(250 $\times$ )和布雷非德菌素A/莫能霉素混合物(250 $\times$ )可保存于- 20 $^{\circ}$ C, 固定破膜剂试剂A和试剂B可保存于室温, 其它试剂可保存于2 - 8 $^{\circ}$ C。所有试剂在推荐的条件下可保存至少1年。

### 未提供的材料设备

1. 细胞培养基 (如 RPMI 1640、DMEM)
2. 胎牛血清 (也许需要)
3. 小鼠淋巴细胞分离液 (Cat No: MLSM1092, MultiSciences) (也许需要)
4. 补偿调节微球 (也许需要)
5. 4% 多聚甲醛 (Cat No: F0001, MultiSciences) (也许需要)
6. 12  $\times$  75 mm 圆底流式管
7. 振荡器
8. CO<sub>2</sub> 恒温培养箱
9. 水平离心机 (配 15 ml 离心管的转子)



## PROTOCOL

### Sample collection and treatment

Collect appropriate amount of anticoagulant blood by using heparin as anticoagulant or other anticoagulants (e.g. EDTA, sodium citrate), store at room temperature or 2 - 8°C, and detect on the same day.

For spleen, collect and prepare as single cell suspension by using appropriate method, and remove tissue mass, detect on the same day.

### Sample preparation

1a. *For anticoagulant blood with heparin as anticoagulant*, pipet 125  $\mu$ l anticoagulant blood into 12  $\times$  75 mm round bottom test tubes, add 125  $\mu$ l medium without FBS and 1  $\mu$ l PMA/Ionomycin Mixture (250 $\times$ ) and 1  $\mu$ l BFA/Monensin Mixture (250 $\times$ ). Mix 125  $\mu$ l anticoagulant blood and 125  $\mu$ l medium, served as control. Mix well, incubate in CO<sub>2</sub> incubator at 37°C for 4 - 6 hours, vortex every 1 - 2 hours during incubation.


**Note:** Anticoagulant blood with heparin as anticoagulant could also be treated by method 1b, more cytokines could be detected in our tests. The best protocol should be optimized by the end-user.

1b. *For anticoagulant blood with other anticoagulant (e.g. EDTA, sodium citrate)*, isolate peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) by using Lymphocyte separation medium (Cat No: MLSM1092, MultiSciences). Resuspend pellet at 1  $\times$  10<sup>7</sup>/ml in medium with 10 % FBS. Pipet 250  $\mu$ l PBMCs into 12  $\times$  75 mm round bottom test tubes, add 1  $\mu$ l PMA/Ionomycin Mixture (250 $\times$ ) and 1  $\mu$ l BFA/Monensin Mixture (250 $\times$ ). With PBMCs only as control. Mix well, incubate in CO<sub>2</sub> incubator at 37°C for 4 - 6 hours, vortex every 1 - 2 hours during incubation.

1c. *For spleen*, prepare single cell suspension by using appropriate method and remove tissue mass. (Optional) Isolate spleen mononuclear cells by using Lymphocyte separation medium (Cat No: MLSM1092, MultiSciences).

Resuspend pellet at 1  $\times$  10<sup>7</sup>/ml in medium with 10 % FBS. Pipet 250  $\mu$ l mononuclear cells into 12  $\times$  75 mm round bottom test tubes, add 1  $\mu$ l PMA/Ionomycin Mixture (250 $\times$ ) and 1  $\mu$ l BFA/Monensin Mixture (250 $\times$ ). With mononuclear cells only as control. Mix well, incubate in CO<sub>2</sub> incubator at 37°C for 4 - 6 hours, vortex every 1 - 2 hours during incubation.

**Note:** Sometimes, more cytokines could be detected in mononuclear cells after isolation by Lymphocyte separation medium in our tests. The best protocol should be optimized by the end-user. PMA/Ionomycin Mixture (250 $\times$ ) and BFA/Monensin Mixture (250 $\times$ ) are extremely volatile, tighten immediately the lid after use.

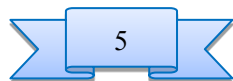

## 实验步骤

### 样本收集和处理

使用肝素或其它抗凝剂 (如 EDTA、枸橼酸钠)作为抗凝剂, 收集适量抗凝血, 室温或 2 - 8°C 保存, 并于当天进行检测。

对于脾脏组织, 采集新鲜样本后通过适当的方法制备成单细胞悬液, 并去除团块, 于当天进行检测。

### 样本制备

1a. *对于肝素抗凝血*, 取 125  $\mu$ l 抗凝血至流式管中, 加入 125  $\mu$ l 不含血清的培养基和 1  $\mu$ l PMA/Ionomycin Mixture (250 $\times$ )和 1  $\mu$ l BFA/Monensin Mixture (250 $\times$ )。取 125  $\mu$ l 抗凝血和 125 $\mu$ l 不含血清的培养基, 作为对照。混匀, 37°C 孵育 4 - 6 小时, 每隔 1 - 2 小时取出震荡混匀。

**注:** 肝素抗凝血样本也可选择方法 1b 进行处理, 在我们的试验结果中, 比全血样本能检测到更多的细胞因子。最佳方案需用户自行摸索。

1b. *对于使用其它抗凝剂 (如 EDTA、枸橼酸钠抗凝血)*, 用淋巴细胞分离液 (Cat No: MLSM1092, MultiSciences) 分离外周血单个核细胞 (PBMCs)。用含 10 % 胎牛血清的培养基重悬沉淀, 使细胞浓度为 1  $\times$  10<sup>7</sup>/ml。取 250  $\mu$ l PBMCs 至流式管中, 加入 1  $\mu$ l PMA/Ionomycin Mixture (250 $\times$ ) 和 1  $\mu$ l BFA/Monensin Mixture (250 $\times$ )。以只含 PBMCs 的样本作为对照。混匀, 37°C 孵育 4 - 6 小时, 每隔 1 - 2 小时取出震荡混匀。

1c. *对于脾脏组织*, 使用适当的方法制备成单细胞悬液, 并去除团块。  
(可选) 使用淋巴细胞分离液 (Cat No: MLSM1092, MultiSciences) 分离制备脾单个核细胞。用含 10 % 胎牛血清的培养基重悬沉淀, 使细胞浓度为 1  $\times$  10<sup>7</sup>/ml。取 250  $\mu$ l 细胞悬液至流式管中, 加入 1  $\mu$ l PMA/Ionomycin Mixture (250 $\times$ )和 1  $\mu$ l BFA/Monensin Mixture (250 $\times$ )。以只含细胞悬液的样本作为对照。混匀, 37°C 孵育 4 - 6 小时, 每隔 1 - 2 小时取出震荡混匀。

**注:** 在我们的试验中, 脾细胞经淋巴细胞分离液分离后, 有时能检测到更多的细胞因子。最佳方案需用户自行摸索。

PMA/Ionomycin Mixture (250 $\times$ )和 BFA/Monensin Mixture (250 $\times$ )极易挥发, 使用后请及时旋紧管盖。




- Pipet 100  $\mu$ l sample or control into new test tubes, add 5  $\mu$ l Anti-Mouse CD3 $\epsilon$ , FITC and 5  $\mu$ l Anti-Mouse CD4, PerCP-Cy5.5 to each tube. Vortex to mix well, and incubate at room temperature for 15 minutes, protect from light.
- Add 100  $\mu$ l FIX & PERM Medium A to each tube. Vortex to mix well, and incubate at room temperature for 15 minutes, protect from light.
- Add 3 ml pre-cool 1 $\times$  Flow Cytometry Staining Buffer to each tube. Centrifuge at 300  $\times$  g for 5 minutes, discard supernant.  
**Note:** Discard supernant as much as possible, with little residual liquid left.
- Add 100  $\mu$ l FIX & PERM Medium B and 5  $\mu$ l Anti-Mouse IL-17A, PE to each test tube. Vortex to mix well, and incubate at room temperature for 15 minutes, protect from light.
- Add 2 ml 1 $\times$  Flow Cytometry Staining Buffer to each tube. Centrifuge at 300  $\times$  g for 5 minutes, discard supernant.
- Resuspend pellet by adding 500  $\mu$ l 1 $\times$  Flow Cytometry Staining Buffer to each tube, ready for determination. Or add 500  $\mu$ l 1 - 4 % paraformaldehyde to resuspend pellet, then store at 2 - 8 $^{\circ}$ C, protect from light, determine within 24 hours.

#### Detection by flowcytometry

- Voltage and compensation adjustment  
 It is recommended to adjust voltage and compensation of flow cytometer by using compensation beads. It is important to adjust voltage of FSC/SSC and gate target cells because compensation beads are often smaller than cells.
- Correct gating to determine the frequencies of Th17 cells in CD3 $^{+}$ CD4 $^{+}$  T cells.  
**Note:** Acquire at least 20,000 to 30,000 CD3 $^{+}$ CD4 $^{+}$  T cells. Depending on the species and individual differences, frequencies of cytokine producing cells derived from activation of mouse lymphocytes can vary widely for a particular cytokine. In order to make statistically significant frequency measurements, sufficiently large sample sizes should be acquired during flow cytometric analysis.

#### Excitation wavelength and emission wavelength of fluorophore

Fluorophore	Ex (nm)	Em (nm)
FITC	495	519
R-Phycoerythrin (PE)	480;565	578
PerCP-Cy5.5	488	682

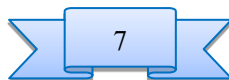

- 从样本管和对照管中取 100  $\mu$ l 细胞悬液至新的流式管中，加入 5  $\mu$ l Anti-Mouse CD3 $\epsilon$ , FITC 和 5  $\mu$ l Anti-Mouse CD4, PerCP-Cy5.5。震荡混匀，室温避光孵育 15 分钟。
- 每管加入 100  $\mu$ l FIX & PERM Medium A，震荡混匀，室温避光孵育 15 分钟。
- 每管加入 2 ml 预冷 1 $\times$  Flow Cytometry Staining Buffer，300  $\times$  g 离心 5 分钟，弃上清。  
**注：**液体尽量倒干净，不要有残留。
- 每管加入 100  $\mu$ l FIX & PERM Medium B 和 5  $\mu$ l Anti-Mouse IL-17A, PE。震荡混匀，室温避光孵育 15 分钟。
- 每管加入 2 ml 1 $\times$  Flow Cytometry Staining Buffer，300  $\times$  g 离心 5 分钟，弃上清。
- 每管加入 500  $\mu$ l 1 $\times$  Flow Cytometry Staining Buffer 重悬，上机检测；或者加入 500  $\mu$ l 1 - 4 % 多聚甲醛重悬，2 - 8 $^{\circ}$ C 避光，于 24 小时内检测。

#### 流式检测


- 调节电压和补偿  
 使用补偿微球对流式细胞仪进行电压和补偿调节。补偿微球通常比目的细胞小，在调节 FSC/SSC 电压和细胞设门时需要注意。
- 正确设门以得到 Th17 细胞在 CD3 $^{+}$ CD4 $^{+}$  辅助 T 细胞中的比例。  
**注：**至少获取 20,000 - 30,000 CD3 $^{+}$ CD4 $^{+}$  T 细胞。对于某一细胞因子，因品系和个体差异，分泌该细胞因子的细胞比例差异很大。为了进行统计学差异比较，请获取足够多的细胞样本。

#### 荧光素激发波长和发射波长

荧光素	最大激发波长(nm)	最大发射波长(nm)
FITC	495	519
R-Phycoerythrin (PE)	480;565	578
PerCP-Cy5.5	488	682



Examples of results/结果示例

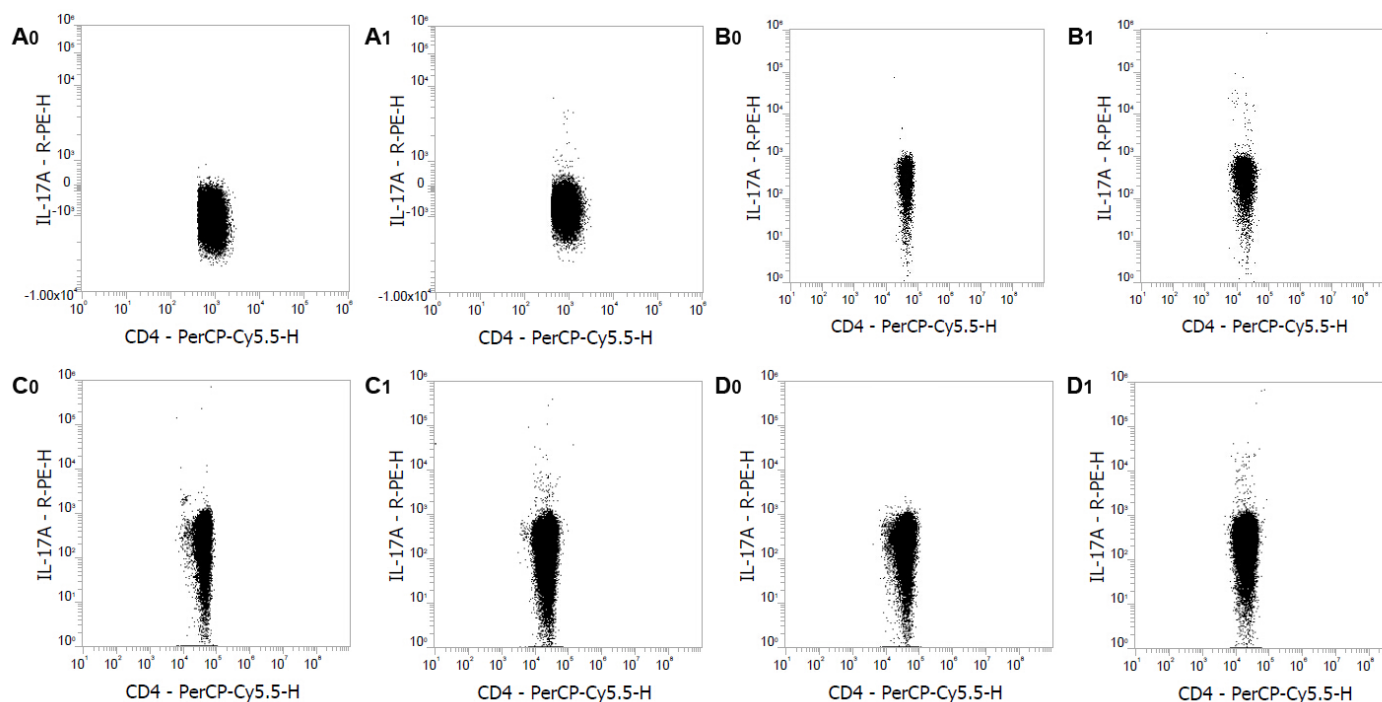

**Flow cytometric analysis of Mouse Th17 Staining Kit.** The staining pattern of IL-17A on resting heparin anticoagulated blood (A<sub>0</sub>), PBMCs from EDTA anticoagulated blood (B<sub>0</sub>), splenocytes (C<sub>0</sub>) and spleen mononuclear cells (D<sub>0</sub>) of normal ICR mouse. PMA/Ionomycin stimulated heparin anticoagulated blood (A<sub>1</sub>), PBMCs from EDTA anticoagulated blood (B<sub>1</sub>), splenocytes (C<sub>1</sub>) and spleen mononuclear cells (D<sub>1</sub>) of normal ICR mouse. Dot plot analysis are derived from gated CD3<sup>+</sup>/CD4<sup>+</sup> cells population. Flow cytometry was performed on a Thermo Fisher Attune NxT.

**使用 Mouse Th17 Staining Kit 进行流式检测。** 正常 ICR 小鼠的静息肝素抗凝血(A<sub>0</sub>)、EDTA 抗凝血来源的 PBMCs (B<sub>0</sub>)、脾细胞(C<sub>0</sub>) 和脾单个核细胞(D<sub>0</sub>) 染色 IL-17A。正常 ICR 小鼠的 PMA/Ionomycin 刺激的肝素抗凝血(A<sub>1</sub>)、EDTA 抗凝血来源的 PBMC (B<sub>1</sub>) 脾细胞(C<sub>1</sub>) 和脾单个核细胞(D<sub>1</sub>) 染色 IL-17A。对 CD3<sup>+</sup>/CD4<sup>+</sup> 细胞进行设门分析。实验在 Thermo Fisher 公司的 Attune NxT 流式细胞仪上进行。